



KONICA MINOLTA

IMPRESORA LASER  
**DRYPRO**  
MODELO Sigma




DRYPRO

Giving Shape to Ideas

## ■ DRYPRO Sigma - Especificaciones

Fuente del Láser	Láser semiconductor
Tamaño de la Película	Seleccionable de: 14"x17"(35x43cm), 11"x14"(28x35cm), 10"x12"(25x30cm) and 8"x10"(20x25cm)
Películas	Películas de grabado de imágenes en seco SD-S
Formato de Imagen	1,2,4,6,8,9,12,15,16,20,24,30,35
Memoria para Imágenes	2GB
Tamaño de la Matriz	78µm
Entrada de Datos de Imagen	14 bits
Capacidad de Procesamiento	45 hojas por hora en Películas de 14x17" (35x43"), tamaños de películas pequeños hasta 85 hojas por hora.
Interfaz de Entrada	Ethernet 10/100/1000 base-T DICOM integrado con Interfaz que soporta impresión desde cualquier modalidad de impresión DICOM
Condiciones de Operación	Temperatura: entre 59°F y 91°F (15°C y 33°C) Humedad: 80% HR sin condensación
Potencia	UL: 100-120V ±10% (50/60 Hz) 9A CE: 200-240V ±10% (50/60 Hz) 5A
Dimensiones / Peso	Ancho 597 mm x profundidad 649 mm x Altura 463 mm / 54 Kgs ( 121lb)

## ■ DRYPRO Sigma – Dimensiones Exteriores

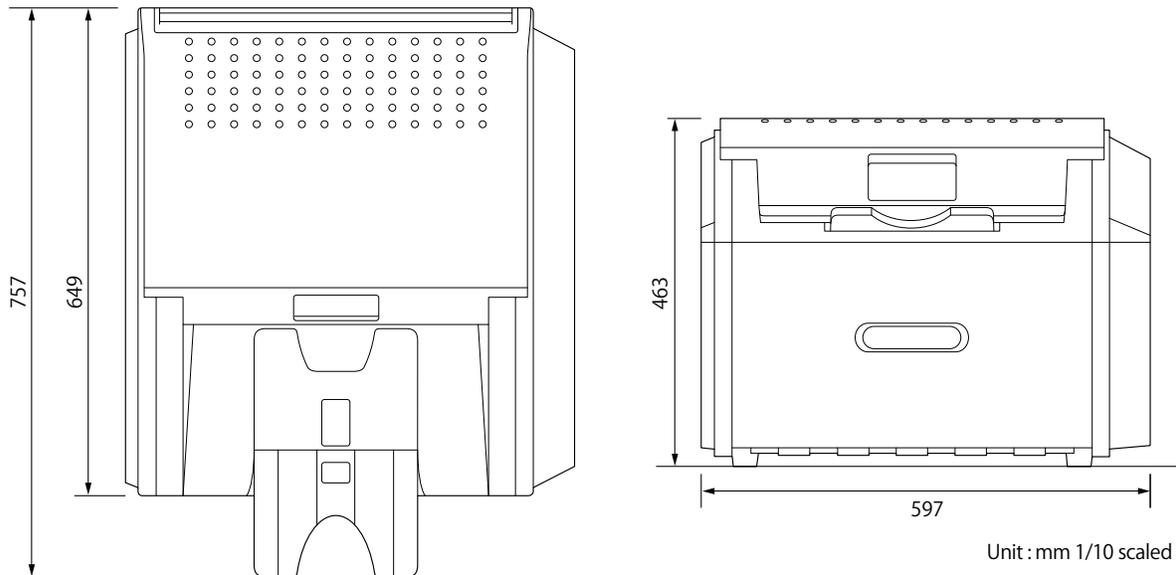

★Estas Especificaciones están sujetas a cambios sin previa notificación

## EL COMPROMISO DE KONICA MINOLTA CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

En Konica Minolta, su total satisfacción es nuestro principal objetivo. Desde la pre-instalación durante toda la vida de su inversión, nuestro plantel profesional, conjuntamente con los revendedores capacitados y certificados de Konica Minolta le proporciona la experiencia técnica que usted necesita. Ya sea a través de nuestro soporte telefónico 24/7, nuestro servicio de acceso remoto o nuestro Equipo de soporte al servicio en el campo, sus necesidades siempre están cubiertas.

El honor de haber sido considerados el proveedor CR número uno de la industria durante cinco años consecutivos implica una enorme responsabilidad. Usted puede estar seguro que su equipo Konica Minolta cumplirá sus expectativas más elevadas por muchos años.



**KONICA MINOLTA**

**KONICA MINOLTA MEDICAL IMAGING USA, INC.**

411 NEWARK POMPTON TURNPIKE

WAYNE, NJ 07470

TEL: (973) 633-1500 FAX: (973) 633-0562

WEBSITE: [medical.konicaminolta.us](http://medical.konicaminolta.us)



KONICA MINOLTA

# SIGMA PACKAGE

DRYPRO Sigma es una impresora láser de mesa que agrega verdadero valor a aquellas instituciones que usan película. Esta impresora hace el cambio a digital fácil y eficaz cuando se combina con ImagePilot Sigma. Un solo paso es todo lo que necesita para llegar al mundo digital.



DIGITALIZADOR DIRECTO




ESTACIÓN DE IMAGEN



IMPRESORA LASER


*ImagePilot*  
*Sigma*

*DRYPRO*  
Sigma

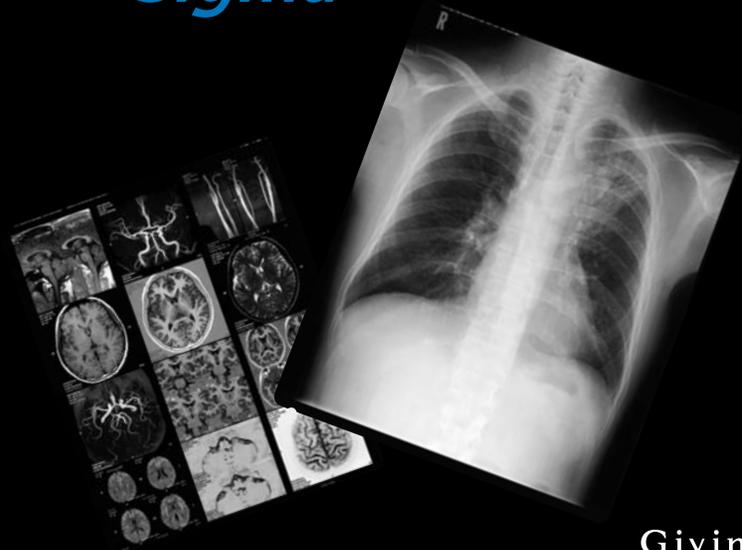

Giving Shape to Ideas

# Desde el registro del paciente hasta la impresión de la película, Konica Minolta proporciona un flujo de trabajo completo.

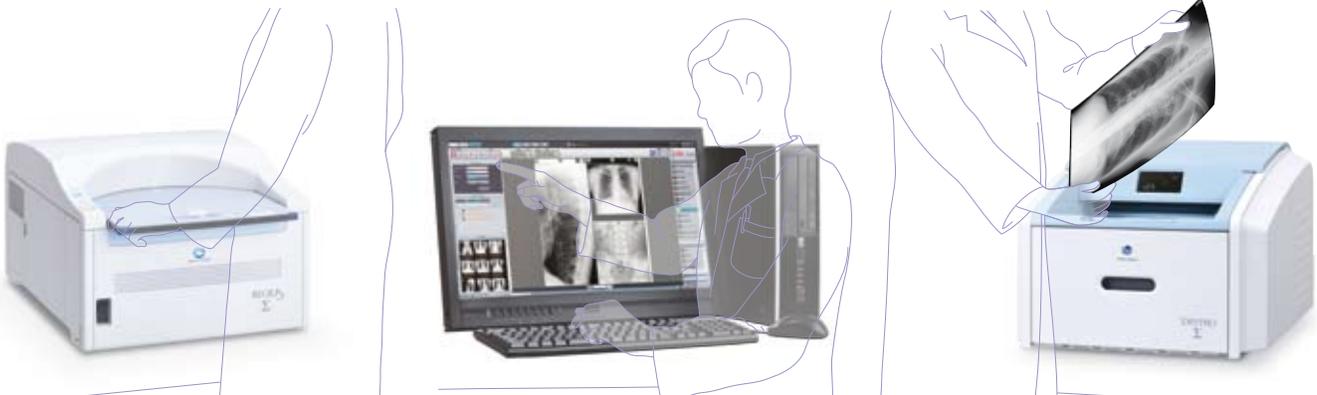

## I. Digitalice

Solo inserte y exponga el casete en el lector digital REGIUS Sigma e ImagePilot automáticamente procesara la imagen para optimizar la visualización del diagnostico. REGIUS Sigma proporciona hasta 45 placas por hora (14x17").

## II. Vista de Impresión


El ImagePilot Sigma tiene un modo de composición de impresión que ajusta las imágenes, diseños y anotaciones libremente. Dado que se pueden hacer ajustes en la imagen escaneada sin necesidad de cambiar a otra pantalla, la imagen puede ser ajustada rápidamente.

## III. Imprima

Luego que la imagen ha sido enviada a imprimir desde el ImagePilot, el DRYPRO Sigma puede imprimir hasta 45 hojas de película por hora (14x17 "). DRYPRO Sigma tiene cuatro tipos de películas disponibles que pueden ser utilizadas según las necesidades del usuario.

### Diseño compacto

DRYPRO Sigma es una impresora láser de mesa que cuenta con un tamaño compacto de tan solo 65x60cm. Está diseñado para integrarse perfectamente en diferentes entornos cuando se combina con ImagePilot Sigma.

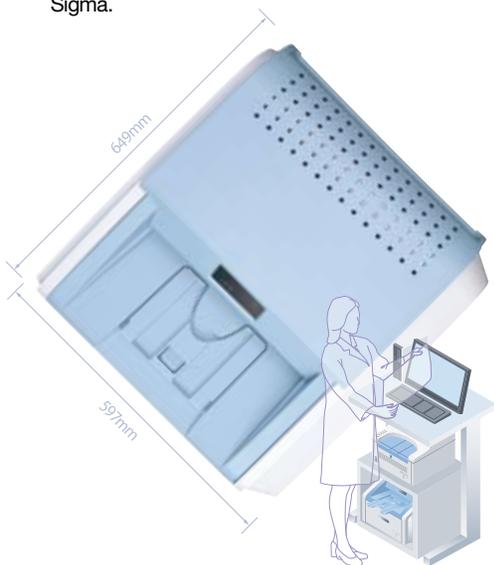

### Cuatro tamaños de película y un proceso fácil de carga

Cambiar el tamaño la película es un proceso sencillo. Los usuarios pueden utilizar cuatro tamaños de películas para diferentes propósitos. Abra la cubierta frontal, extraiga una película, y cárguela de nuevo.




### Fácil de utilizar

El DRYPRO Sigma es muy sencillo de operar. Una interfaz de usuario sencilla hace fácil la operación de esta impresora, eliminando la necesidad de capacitación al usuario.

### IMPRESORA DICOM

DRYPRO Sigma se puede conectar fácilmente a otras consolas de CR y DR, CT, RM, además del ImagePilot. Imágenes No-DICOM se pueden importar fácilmente usando ImagePilot Sigma y luego pueden imprimirse utilizando DRYPRO Sigma.

#### ■ Ejemplo de un diseño de conectividad

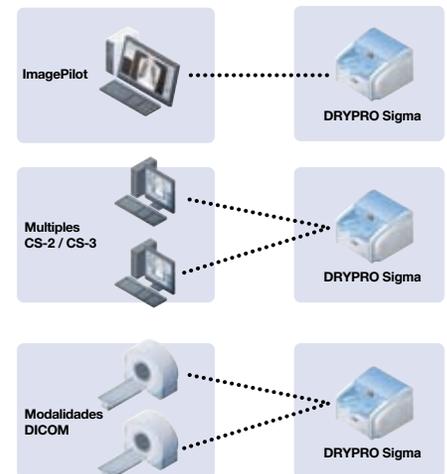

KONICA MINOLTA

**KONICA MINOLTA MEDICAL IMAGING USA, INC.**  
411 NEWARK POMPTON TURNPIKE  
WAYNE, NJ 07470  
TEL: (973) 633-1500 FAX: (973) 633-0562  
WEBSITE: [medical.konicaminolta.us](http://medical.konicaminolta.us)